

Único e individual
Papel de coloración y material para técnica de laminación con resina



Juego de colores: decoración con papel de coloración y material para la técnica de laminación con resina

Para la diversidad óptica en la áreas de órtesis y prótesis, hay que tener en cuenta a los papeles de coloración (papeles termosensibles) y a los materiales para la técnica de laminación con resina. Los materiales se pueden utilizar de variadas formas y posibilitan el diseño simple e individual de superficies variadas.

Termoplásticos blancos como ejemplo polietilenos (Streifylen, RCH 500, RCH 1000), polipropilenos (Streifydur) y copolímeros (Streifydur Ortho) se pueden colorear con los atractivos diseños de los Colouring Paper. También en la técnica para laminar con resina se pueden realizar variados diseños con la ayuda de los materiales para la técnica de laminación con resina.


Streifeneder ortho.production GmbH le ofrece una especial gama de motivos para niños, jóvenes y adultos.

También ofrecemos para los más creativos el «My.Design» de Streifeneder ortho.production GmbH.

Los croquis y diseños individuales los pueden obtener en papel de coloración, en los materiales y tubulares para la técnica de laminación con resina.

Para más información consultar página 36.

Indicaciones para un resultado óptimo con el papel de coloración

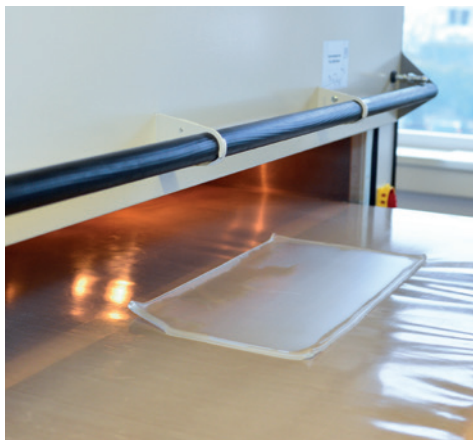

Calentar en toda su extensión en un horno 51M13, según las indicaciones del fabricante, el material cortado a las medidas necesarias para el modelo.



Antes de colocar el papel de coloración con el lado impreso sobre el material precalentado, le recomendamos – sobre todo cuando se tiene motivos con fondo blanco – rociar el material laminado con algo de Silicona Spray para aislamiento 116P11. Esto aumenta la intensidad del color y facilita la retirada.



Finalmente coloque el papel cortado a medida sobre el material precalentado pasando la mano para eliminar las arrugas. La transferencia del color del papel al material plástico dura, dependiendo del tipo de material y motivo aprox. 20 – 30 s.

Para mantener la temperatura recomendada, deslice el material durante el tiempo de transferencia de nuevo al horno de calentamiento.



Para trabajar, hacer uso siempre de guantes protectores resistentes al calor 12P12 O 12P13.

Los mejores resultados los obtendrá con la máxima temperatura indicada. Tener presente que la intensidad del color depende del material sintético y de la materia prima.

En el procesamiento de Streifydur Ortho con papel de coloración recomendamos siempre el uso de Silicona Spray para aislamiento 116P11. El papel de coloración se podrá retirar después de 20 s. Otras recomendaciones para el procesamiento de Streifydur Ortho las encuentra bajo www.streifeneder.es/op/service/videos.

Papel de coloración – unicolor



Los colores son la base en nuestra vida cotidiana. Se utilizan en terapias, influyen en nuestro sistema nervioso, producen sensaciones y asociaciones. Un simple «rojo cereza» sugiere el sabor dulce de la fruta, mientras que un «azul cielo» la ligereza de un día de primavera o verano. Los colores dan señales, limitan cosas entre ellas y hacen reconocibles elementos comunes. ¡Sería inconcebible un entorno solo en blanco y negro!

En el surtido de papel de coloración, los clientes tienen la oportunidad de elegir entre una gama de colores independientes de la moda y clásicos como el rojo, negro o azul, y así encontrar exactamente el color que se adapte a sus pacientes.



Color: negro
Referencia: 120P1/22



Color: azul
Referencia: 120P1/23



Color: rojo
Referencia: 120P1/24



Color: carne
Referencia: 120P1/25



Color: marrón
Referencia: 120P1/26

Papel de coloración – distintos diseños


Los papel de coloración con su gran variedad multicolor, entusiasman de igual manera tanto a pequeños como grandes clientes. Motivos de la naturaleza o técnica figuran entre muestras y diseños abstractos y collages. También imitaciones de materiales como Jeans o madera se pueden traspasar a los diferentes materiales sintéticos. Los variados temas ofrecen una agradable variedad tanto al técnico como al usuario.

Y a pesar de la gran variedad tienen todos los papeles algo en común: Cada uno de ellos está disponible solamente en Streifeneder ortho.production GmbH.





Palisander wood

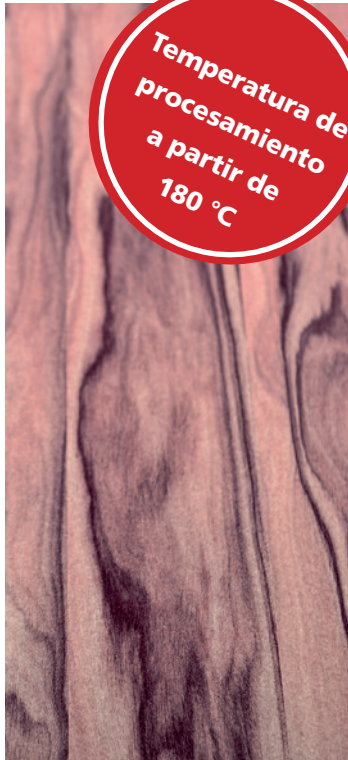

Temperatura de procesamiento a partir de 180 °C

Cobra




Jeans



Camouflage



Carbon

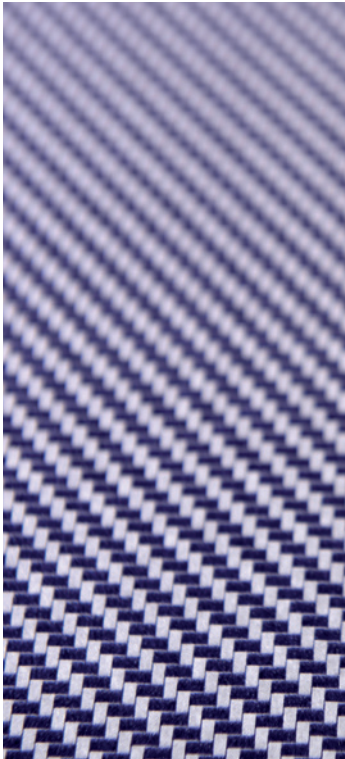

Waves



Hawaiiana



Palm garden





Cactus





Sailor azul



Sailor blanco



Tattoo negro



Tattoo multicolor



Butterfly





Little horses



Pin up




Fox ahoi




Motorbikes



Monster cars

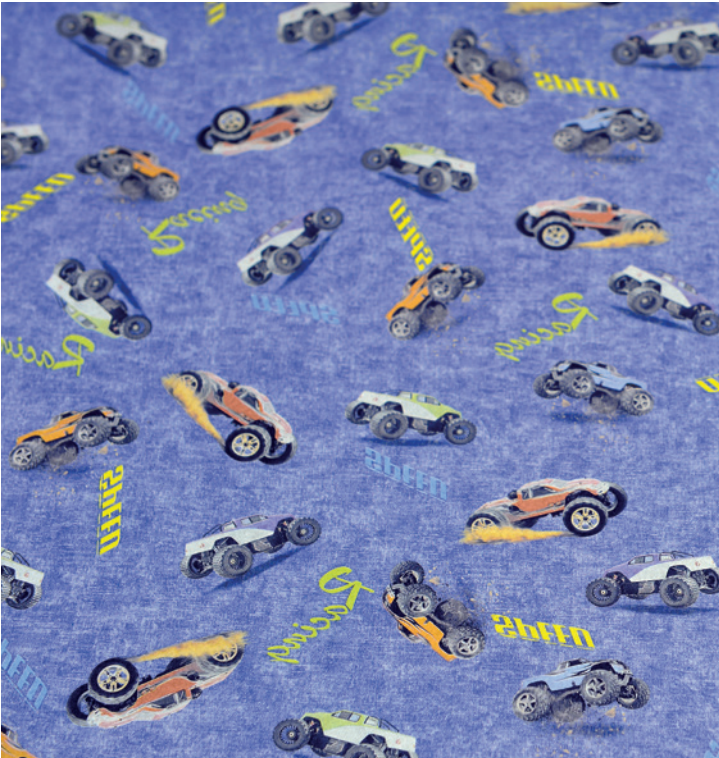

Universe

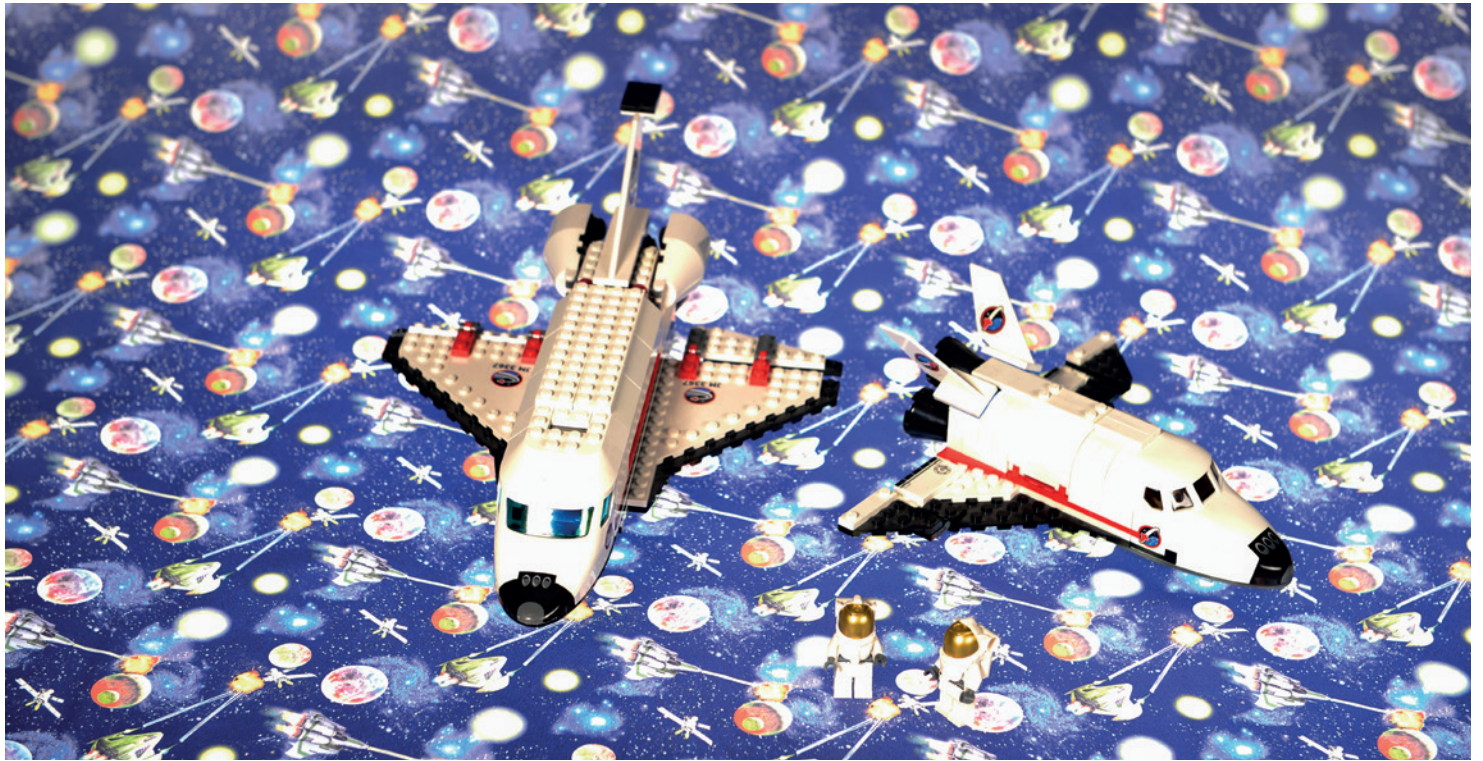

Comic





Información sobre los papeles de coloración (Las imágenes presentadas corresponden aprox. al 25 % de la medida original.)



Little horses

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/01



Pin up

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/02



Cactus

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/03



Universe

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/04



Motorbikes

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/05



Monster cars

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/06



Fox ahoi

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/07



Comic

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/14




Butterfly

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/15

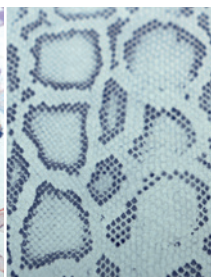

Cobra

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/16



Camouflage

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/17




Waves

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/18

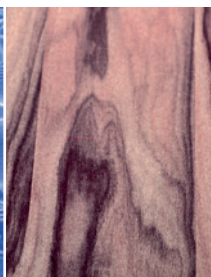


Palisander wood*

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/19

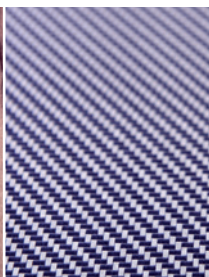

Carbon

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/20



Sailor azul

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/08

Sailor blanco

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/09

Tattoo negro

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/10

Tattoo multicolor

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/11

Hawaiana

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm


Referencia: 120P1/12

Palm garden

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/13

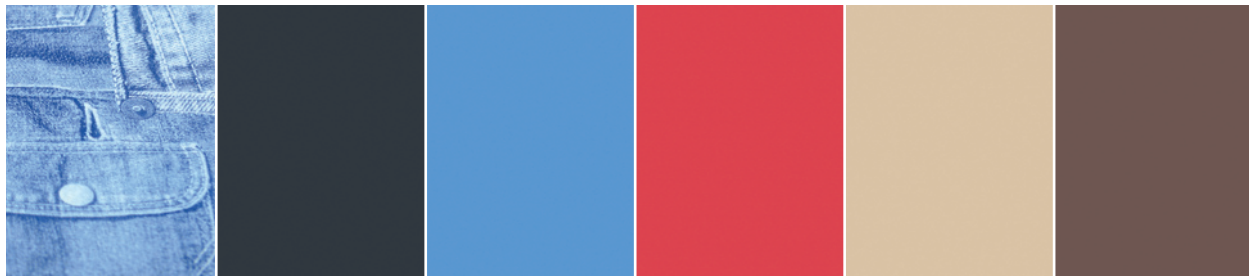

Jeans

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/21

negro

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/22

azul

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/23

rojo

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/24

color carne

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/25

marrón

Medidas (L x A):

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/26

* Temperatura de procesamiento a partir de 180 °C

Material y tubulares para la técnica de laminación con resina

Los materiales para la técnica de laminación con resina se aplicarán como última capa en la laminación, creando un diseño especial de colores sobre la superficie de las órtesis y encajes de prótesis.

El material para la técnica de laminación con resina de Streifeneder ortho.production GmbH, está disponible como género al metro para confeccionar piezas apropiadas al modelo o tubulares de 15 y 20 cm de ancho prefabricados.





Indicaciones para un resultado óptimo con material y tubulares para la técnica de laminación con resina



Cortar a medida el material escogido.
Fijar con alfileres a lo largo de la costura, de manera que el lado impreso de la tela esté en el interior.



Luego coser el tubular y recortar el material sobrante a lo largo de la costura. Ahora dar la vuelta al tubular de modo que el lado impreso esté en el exterior de nuevo.




En el proceso de laminación, el tejido tubular es la última capa que se coloca sin arrugas sobre la pieza de trabajo.

Con el aditamento de resina de moldeo blanca (1 % de la cantidad total), como por ejemplo la pasta colorante 112P36 para resinas acrílicas o el GelCoat 95C11 para resina epoxi, conseguirá colores más brillantes. El material es igualmente extensible en ambas direcciones.

Echo de:

83 % poliéster, 17 % elastán

Diseños favoritos seleccionados no solo están disponibles en papel de coloración, sino también como material y tubulares para la técnica de laminación con resina. Como por ejemplo el diseño «Palisander wood» (nro. de referencia 130P1/19, 131P1/19). Más diseños los encuentra en las sptes. páginas.

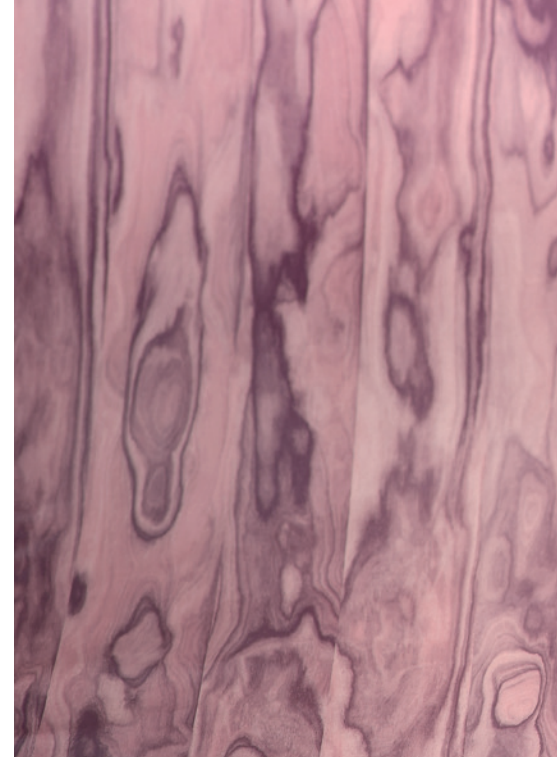



Información sobre los material y tubulares para la técnica de laminación con resina

(Las imágenes presentadas corresponden aprox. al 25 % de la medida original.)



Pin up

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de laminación con resina:

130P1/02

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:

131P1/02S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:

131P1/02M



Motorbikes

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de laminación con resina:

130P1/05

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:

131P1/05S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia tubular para la técnica de laminación con resina:

131P1/05M



Tattoo multicolor

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de laminación con resina:

130P1/11

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:

131P1/11S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:

131P1/11M



Camouflage

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de laminación con resina:

130P1/17

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm


Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:

131P1/17S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:

131P1/17M

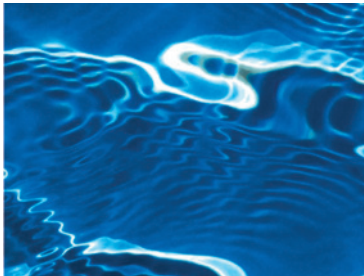

Waves

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm
Referencia material técnica de laminación con resina:
130P1/18

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:
131P1/18S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:
131P1/18M

Palisander wood

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm
Referencia material técnica de laminación con resina:
130P1/19

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:
131P1/19S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:
131P1/19M

Carbon

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm
Referencia material técnica de laminación con resina:
130P1/20

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:
131P1/20S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:
131P1/20M

Jeans

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm
Referencia material técnica de laminación con resina:
130P1/21

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 15 cm:
131P1/21S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm
Referencia para tubular para la técnica de laminación con resina 20 cm:
131P1/21M

Ventajas con «My.Design»

Crear diseños propios y llevar las ideas al papel – es ahora posible con nuestro Streifeneder ortho.production «My.Design».

Aquí, no hay límites para la creatividad, se pueden implementar un logotipo de la empresa, así como fotos personales o motivos de diseño propio.

Los clientes envían los datos digitales de alta resolución a Streifeneder ortho.production GmbH, donde pasan directamente en producción.

Al realizar un pedido podrá escoger entre papel de coloración, material y tubular para técnica de laminación con resina.

La cantidad mínima de pedido es de 10 m.

Especificaciones para sus diseños individuales:

- Archivo de impresión con 300 dpi min.
- Repetición del dibujo tiene que ser reconocible
- Alternativamente la muestra con un ancho de 1600 mm
- Modelo de color: CMYK
- Referencia: 125P1 papel de coloración, 134P1 material para la técnica de laminación con resina, 136P1/S, 136P1/M tubulares para la técnica de laminación con resina

Si el archivo enviado no cumple con los requisitos de impresión aquí establecidos, nos reservamos el derecho de cobrar una tarifa de procesamiento individual.

Aviso legal: Tenga en cuenta que los diseños y motivos presentados deben estar libres de derechos de propiedad de terceros. Si desea utilizar una marca registrada o un dibujo o modelo protegido, es su responsabilidad obtener el derecho de uso del titular y proporcionarnos una prueba de ello.



Ventaja especial del «My.Design» papel de coloración:

en lugar de la impresión que normalmente es sobre un papel de 20 g/m², para las muestras personales se utiliza un papel más resistente de 60 g/m².

La ventaja es una colocación más simple, libre de arrugas y al retirar el papel no se rompe tan fácilmente.

El configurador para el Colouring Paper

Si pierde la vista de conjunto con tantas opciones y apenas se puede decidir por un motivo, encontrará bajo www.streifeneder.es/op/configurador Configurador de Papel de Coloración – la ayuda ideal.

La herramienta en línea ofrece la posibilidad de hacerse una idea con antelación de la órtesis final o simplemente rebuscar a través de la colorida variedad de patrones de acuerdo a su estado de ánimo y deseo. Todos los papeles disponibles con denominación y número de referencia están listados en un deslizador, el usuario encontrará las órtesis seleccionables en la parte superior derecha. La órtesis elegida se puede girar 360° con el ratón, generándose un producto visualizable para los técnicos ortopédicos y los clientes.



Para llegar directamente al Configurador de Papel de Coloración: ¡simplemente escanee el código QR con la tableta o el Smartphone!



Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Alemania
Tel. +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op



300W139/S 2017-06

Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del mismo, sólo se permite con el permiso explícito de Streifeneder ortho.production GmbH.
Las medidas y pesos son valores aproximados. Están reservados durante el periodo de entrega, modificaciones en la construcción y forma, divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro por parte del fabricante, si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para el comprador.
Después del cierre de la edición del folleto, 27.06.2017, pueden producirse cambios en el producto.
Se aplican los términos y condiciones generales, que se pueden consultar en todo momento bajo www.streifeneder.es/op.