

Medias de compresión



Terapia postoperatoria de compresión

Después de una amputación, una protetización sin demora se ve dificultada por el muñón hinchado (en forma de pera), protetización que sin embargo es muy importante fisiológica y psicológicamente para el paciente.

Las medias de compresión apoyan a la reducción de edemas en la herida postoperatoria, previniendo un nuevo aumento del volumen. Al mismo tiempo proporcionan al muñón una ventajosa forma cilíndrica respectivamente cónica, las cuales permiten una buena protetización. Una vez que se haga uso de una prótesis provisional, los tejidos blandos se estabilizarán por el encaje de la prótesis. Las medias de compresión impiden cambios de volumen indeseados una vez que se retire la prótesis.

Las medias de compresión después de una amputaciones transfemoral (451A1 / 451A2) respectivamente amputación transtibial (452A1 / 452A2), se obtienen en diferentes medidas y largos en las clases de compresión 1 y 2.

Clase de compresión	Intensidad de compresión	Compresión en kPa (1 kPa = 7,5 mmHg)	Compresión en mmHg (1 mmHg = 0,133 kPa)
1	ligera	2,4 a 2,8	18 a 21
2	media	3,1 a 4,3	23 a 32

Clases de compresión, fuente: Gütesicherung RAL-GZ 387/1, enero 2008

Otros ventajas


- tratamiento antibacteriano con fibras de plata OEKO-TEX® estándar 100 – reduce a un mínimo la formación de olores y previene la irritación de la piel
- género de punto circular – se adapta a la anatomía del usuario
- para mayor confort provista de costura lisa remallada al final del muñón
- se puede lavar a máquina a diario



Medias de compresión


Media de compresión transtibial 452A1 / 452A2

- cinta adhesiva con botones de silicona
- tratamiento antibacteriano
- Material: 78% poliamida, 22% elastano

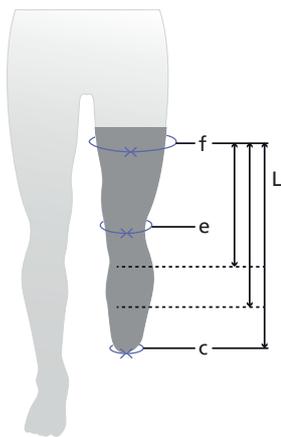

Media de compresión transfemoral 451A1 / 451A2

- con fijación en la cadera
- tratamiento antibacteriano
- Material: 78% poliamida, 22% elastano

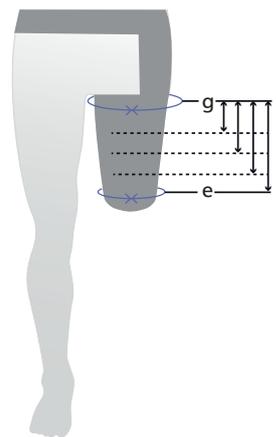

Medida	Perímetro f	Perímetro e	Perímetro c	Largo L
XS	41 cm	31 cm	29 cm	30, 38, 46 cm
S	44 cm	34 cm	32 cm	30, 38, 46 cm
M	47 cm	37 cm	35 cm	30, 38, 46 cm
L	50 cm	40 cm	38 cm	30, 38, 46 cm
XL	53 cm	43 cm	41 cm	30, 38, 46 cm
XXL	56 cm	46 cm	44 cm	30, 38, 46 cm

Medida	Perímetro g	Perímetro e	Largo L
XS	44 cm	31 cm	20, 25, 30, 35 cm
S	48 cm	34 cm	20, 25, 30, 35 cm
M	52 cm	37 cm	20, 25, 30, 35 cm
L	56 cm	40 cm	20, 25, 30, 35 cm
XL	60 cm	43 cm	20, 25, 30, 35 cm
XXL	64 cm	46 cm	20, 25, 30, 35 cm

Ayuda de pedido

Comp. clase 1. 452A1 + medida + largo / Comp. clase 2. 452A2 + medida + largo
Ejemplo de pedido: 452A1/XS30 = Comp. clase 1, medida XS, largo 30 cm

Consejos y recomendaciones:

Recomendamos el uso de guantes de goma para proteger las medias al momento de ponérselas o quitárselas. Poner atención de no tirar del material al ponerse la media sino de levantarla desde el extremo del muñón.

