

## Nuevas formas para una mayor dinámica Órtesis para pie pendular de carbono Pre-preg


Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering  
Alemania  
Tel. +49 8141 6106-0  
Fax +49 8141 6106-70  
export@streifeneder.de  
www.streifeneder.es/op



300W125/S 2018-04



## El PeroSupport.tec

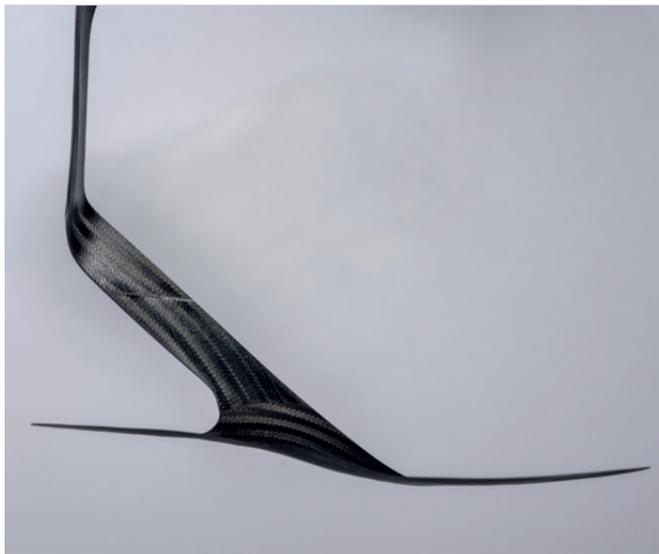

### De peso reducido y flexible

Fabricado con carbono Pre-preg de alta calidad, el nuevo PeroSupport.tec es extremadamente estable y ligero. El material almacena la energía obtenida en la fase de apoyo y la devuelve al usuario en la fase de oscilación. Las zonas del antepié y del talón son flexibles para permitir al paciente una marcha lo más fisiológica y dinámica posible. La barra de la pantorrilla y el área metatarsiana soportan activamente el levantamiento del pie como elementos de apoyo.



### Base perfecta

La reducida altura total del PeroSupport.tec y la suela mejorada garantizan la máxima comodidad de uso: La forma de la suela del nuevo modelo es mucho más pronunciada para mejorar la adaptación al zapato del paciente. La forma de la suela es ahora más estrecha y se puede cortar hasta el borde exterior marcado con unas tijeras estables.



### Colocación con un solo clic

Es de suma importancia que la órtesis de flexión dorsal pueda ponerse y quitarse con facilidad. Muchos usuarios están limitados en sus habilidades motoras finas debido a la paresia (apoplejía). La nueva cerradura magnética de alta calidad de la marca Fidlock cumple perfectamente estos requisitos. Prácticamente el cierre encaja por sí solo con un clic suave y el paciente reconoce inmediatamente si la órtesis está bien cerrada. La apertura también es rápida y sencilla gracias al imán.

#### Novedad:

El cierre magnético Fidlock 44P20/25 ahora también está disponible por separado como pieza de recambio.

### Indicación

- paresia del peroneo
- usuarios que sufren de pie pendular
- Inflamación de la articulación de tobillo
- tratamiento postoperatorio después de una ruptura del tendón de Aquiles

#### Es bueno saberlo:

La suela de la órtesis PeroSupport.pro ahora también se puede cortar con unas tijeras estables. Ofrece adicionalmente rotación y estabilidad en la pantorrilla.

### PeroSupport.tec

Medida	Lado	Talla de calzado	Altura	Referencia
XS	izquierdo	34 – 36	32,5 cm	197R4/L0
S	izquierdo	36 – 39	33,5 cm	197R4/L1
M	izquierdo	39 – 42	34,5 cm	197R4/L2
L	izquierdo	42 – 45	35,5 cm	197R4/L3
XL	izquierdo	45 – 48	37,5 cm	197R4/L4
XS	derecho	34 – 36	32,5 cm	197R4/R0
S	derecho	36 – 39	33,5 cm	197R4/R1
M	derecho	39 – 42	34,5 cm	197R4/R2
L	derecho	42 – 45	35,5 cm	197R4/R3
XL	derecho	45 – 48	37,5 cm	197R4/R4